

The ZARC logo is located in the top right corner. It consists of the word "ZARC" in a bold, white, sans-serif font, with a blue wavy line underlining the letter "Z". The logo is set against a black rectangular background.

ZEvo mini

Motor de endodoncia con rotación
continua y reciprocante

**LA ENDODONCIA AÚN MÁS FÁCIL
Y EN TAMAÑO MINI**



DE ODONTÓLOGOS
PARA ODONTÓLOGOS

Z-Evo mini

Z-Evo mini se emplea para el tratamiento del conducto utilizando instrumentos de endodoncia en rotación continua controlada por torque y en movimiento recíprocante.



CABEZAL AJUSTABLE A 360°

Su cabezal ajustable de 360° facilita el acceso a cualquier conducto.



TAMAÑO REDUCIDO

Igual de potente que el Z-Evo clásico pero en tamaño reducido.



BATERÍA DE LARGA DURACIÓN

Batería de litio 800 mAh de larga duración que permite utilizar el dispositivo incluso cuando está conectado al suministro eléctrico. Facilidad en el proceso de carga gracias a su base de recarga.




CONTROL SEGURO DE TORQUE

La pantalla muestra durante su uso el torque inmediato. De este modo, el clínico puede regular los parámetros adaptándolos a cada sistema y evitar así sobrepasar los máximos y producir la rotura de la lima.



MOTOR RECÍPROCANTE

Z-Evo mini realiza movimientos rotatorios y recíprocantes, se adapta a cualquier sistema de limas que haya en el mercado.

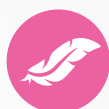

MÁXIMA LIGEREZA

El dispositivo solo pesa 99 g facilitando su uso durante el tratamiento.



CONTROL DE TORQUE

En diferentes modos de trabajo el valor del torque se puede **ajustar de forma diferente**.

Z-Evo mini gestiona el estrés de la lima de una manera inteligente. Cuando se alcanza el límite de torque, en lugar de pasar a modo inverso, el motor oscila hasta que se reduce el estrés. Una vez que vuelve al nivel de torque predeterminado, la lima gira de nuevo en rotación continua.

Es posible acceder a **5 valores fijos de ángulo recíprocante** en el modo recíprocante MO.



CALIBRACIÓN DEL TORQUE
Para un ajuste preciso.



PANTALLA OLED
Para una imagen de mayor calidad.



MONITOR AMBIDIESTRO
La pantalla se puede rotar para su uso con la mano izquierda o derecha.



EL MOTOR DE ENDODONCIA MÁS LIGERO DEL MERCADO

Pesa menos de 100 g, reduciendo la fatiga en la mano del endodoncista durante el tratamiento y proporcionando una experiencia de uso extraordinaria.

MEJOR VISIBILIDAD Y ACCESO POSTERIOR

Su contraángulo rotatorio es de tamaño reducido.



Contraángulo Z-Evo mini con cabezal y cuello reducidos.



Contraángulo convencional.


ZEvo mini

BIENVENIDOS A LA ENDODONCIA DEL FUTURO

Universalizamos la endodoncia favoreciendo el acceso a una práctica segura y de calidad.

Especificaciones técnicas

Rango de velocidad	120 - 650 rpm
Rango de torque	0.5 - 4.0 N•cm
Número de memorias	10 (M0 - M9)
Potencia de la batería	800 mAh

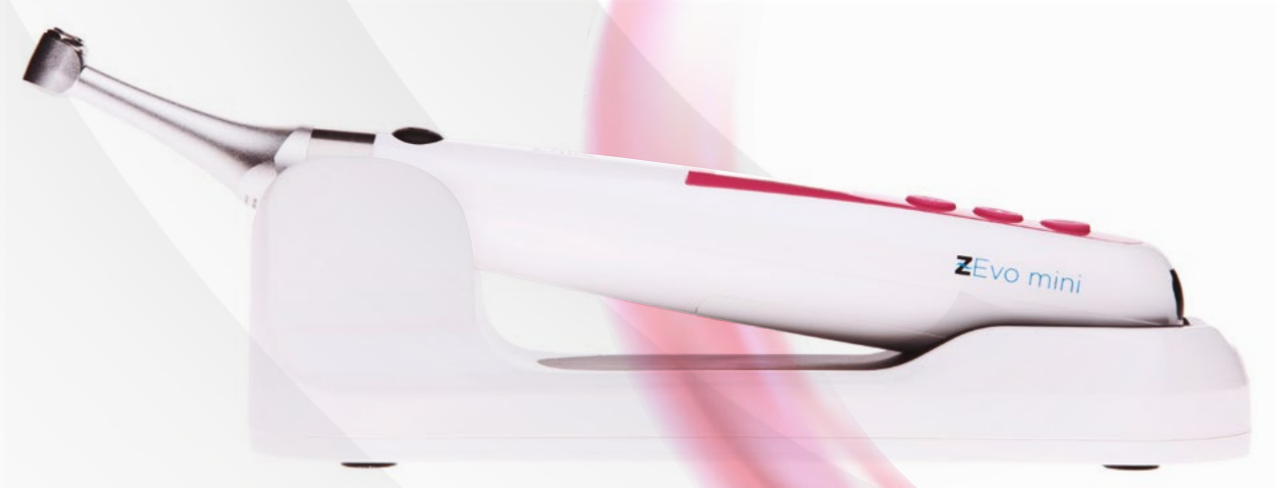

Referencias de Z-Evo mini

Motor de endodoncia Z-Evo mini **6080240**

Contraángulo Z-Evo mini **6036101**